Les dessous du gant de soin

Mars 2024

Qui suis-je et comment me choisir ?


LATEX
souple, fin et flexible
Soins avec des objets piquants ou coupants

Contact direct sur muqueuses et peau lésée
VINYLE
rigide, un peu épais

NITRILE **Allergie au latex**
très souple et résistant à la déchirure



Sécurité garantie !

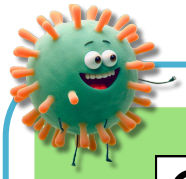

CE MDR (EU) 2017/745

Je suis un dispositif médical

Marquage CE et conformité avec le règlement européen 2017/745 (Dispositifs Médicaux de classe I)


- Norme NF EN 455-1 à -4

CAT 3 CE PPE (EU) 2016/425

Je suis un Equipement de Protection Individuelle

Conformité avec le règlement européen 2016/425 relatif aux EPI (ou PPE en anglais) de catégorie 3


- EN ISO 21420 : Innocuité, confort et efficacité, marquage
- EN ISO 374-5 : Risques liés aux micro-organismes

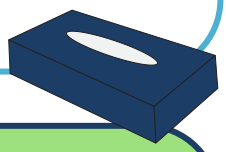

Toutes les informations utiles figurent sur la boite

- LATEX — matériau
- usage unique
- **M** — taille
- Protection contre le risque microbiologique
- contact direct avec les aliments possible

Sha et moi, unis pour le meilleur!

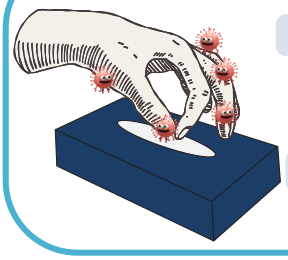

Une friction hydro-alcoolique AVANT de me prendre dans la boite ...

et hop !

j'évite de CONTAMINER les autres gants avant qu'ils ne soient prélevés par la personne suivante !






Retrouvez-nous en animation!

Comment déterminer votre taille de gant ?

1. Positionnez votre main majeure (la droite) sur le gabarit, doigts serrés et pouce écarté
2. Veillez à respecter la position du creux du pouce
3. Déterminez votre taille à l'aide des repères à droite

A imprimer en taille réelle
GABARIT DROITIERS

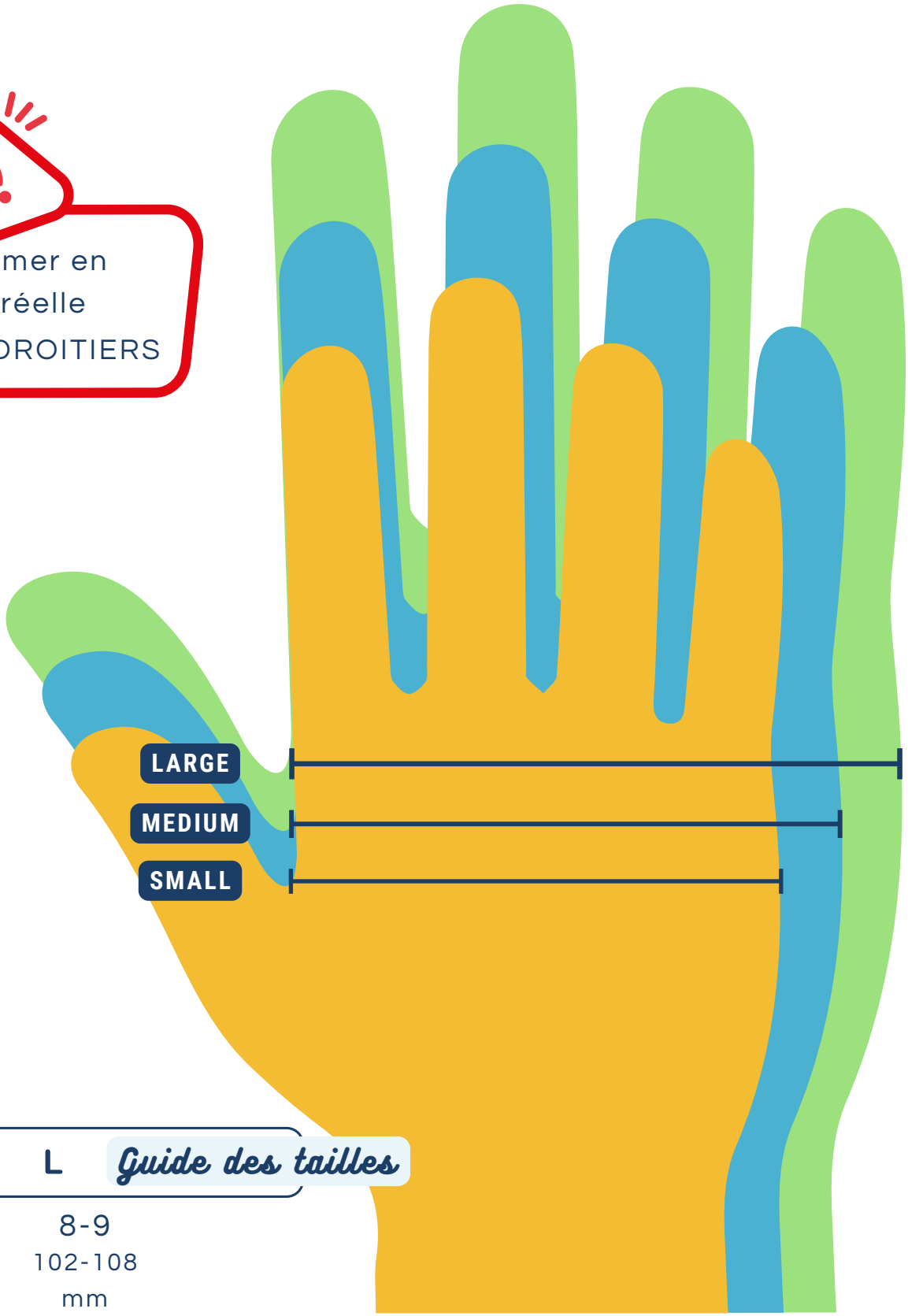

S	M	L	Guide des tailles
6-7	7-8	8-9	
81-87 mm	91-97 mm	102-108 mm	